

# ラインナップ

ブルーのガイドラインを参考に周囲を計測し、適切なサイズを使用して下さい。



## リスト スプリント

半肢(片側) 780 点


サイズ	周囲	商品コード	JANコード(ひだり)	JANコード(みぎ)
XS	130 ~ 205mm	AQN160XS-L/R	4580307866210	4580307866272
S	150 ~ 230mm	AQN160S-L/R	4580307866227	4580307866289
M	175 ~ 270mm	AQN160M-L/R	4580307866234	4580307866296
L	175 ~ 290mm	AQN160L-L/R	4580307866241	4580307866302



## サムスパイカ スプリント

半肢(片側) 780 点


サイズ	周囲	商品コード	JANコード(ひだり)	JANコード(みぎ)
XS	120 ~ 195mm	AQN110XS-L/R	4580307866586	4580307866647
S	120 ~ 230mm	AQN110S-L/R	4580307866593	4580307866654
M	125 ~ 260mm	AQN110M-L/R	4580307866609	4580307866661
L	140 ~ 280mm	AQN110L-L/R	4580307866616	4580307866678

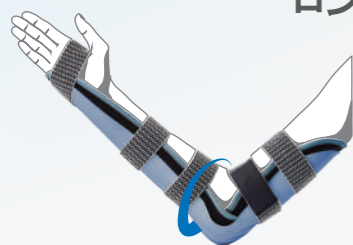

## ロングアーム スプリント

上肢・下肢(片側) 1,200 点

サイズ	周囲	商品コード	JANコード
XS	175 ~ 250mm	AQN170XS	4580307866333
S	190 ~ 315mm	AQN170S	4580307866340
M	200 ~ 325mm	AQN170M	4580307866357
L	270 ~ 420mm	AQN170L	4580307866364

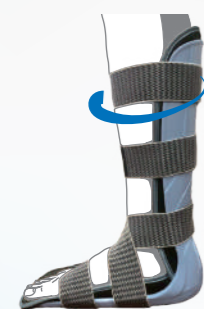

## ショートレッグ スプリント

半肢(片側) 780 点

サイズ	周囲	商品コード	JANコード
XS	200 ~ 300mm	AQN180XS	4580307866395
S	220 ~ 360mm	AQN180S	4580307866401
M	265 ~ 400mm	AQN180M	4580307866418
L	300 ~ 430mm	AQN180L	4580307866425
XL	305 ~ 470mm	AQN180XL	4580307866432



## シリンダー スプリント

上肢・下肢(片側) 1,200 点

サイズ	周囲	商品コード	JANコード
S	310 ~ 485mm	AQN210S	4580307866531
M	370 ~ 570mm	AQN210M	4580307866548
L	390 ~ 600mm	AQN210L	4580307866555

製造販売元

**JHM 日本ヒューマンメディック株式会社**

〒870-0848 大分市賀来北2丁目16番34号

TEL: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470

詳しい製品の情報は下記ホームページにも掲載しております。



<http://www.hyuman.co.jp>  
日本ヒューマンメディック

届出番号: 44B1X10001000103

●お問い合わせ

# ALLONE QUICK SPLINT

## オールワン クイック スプリント

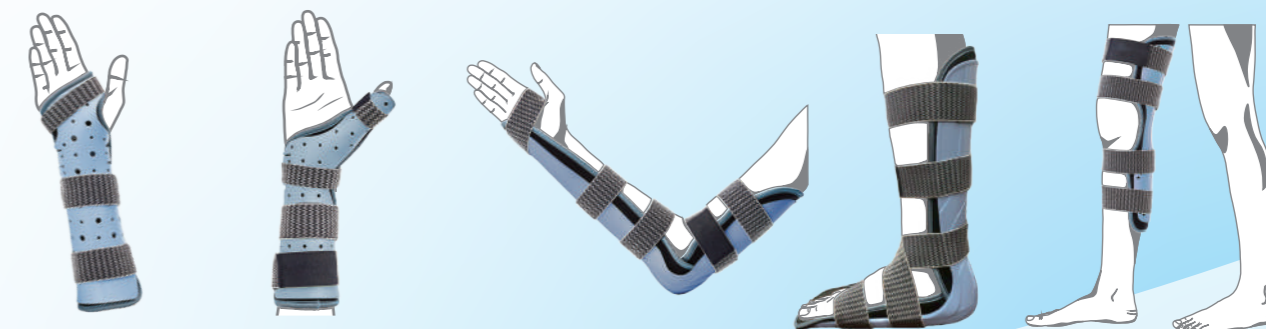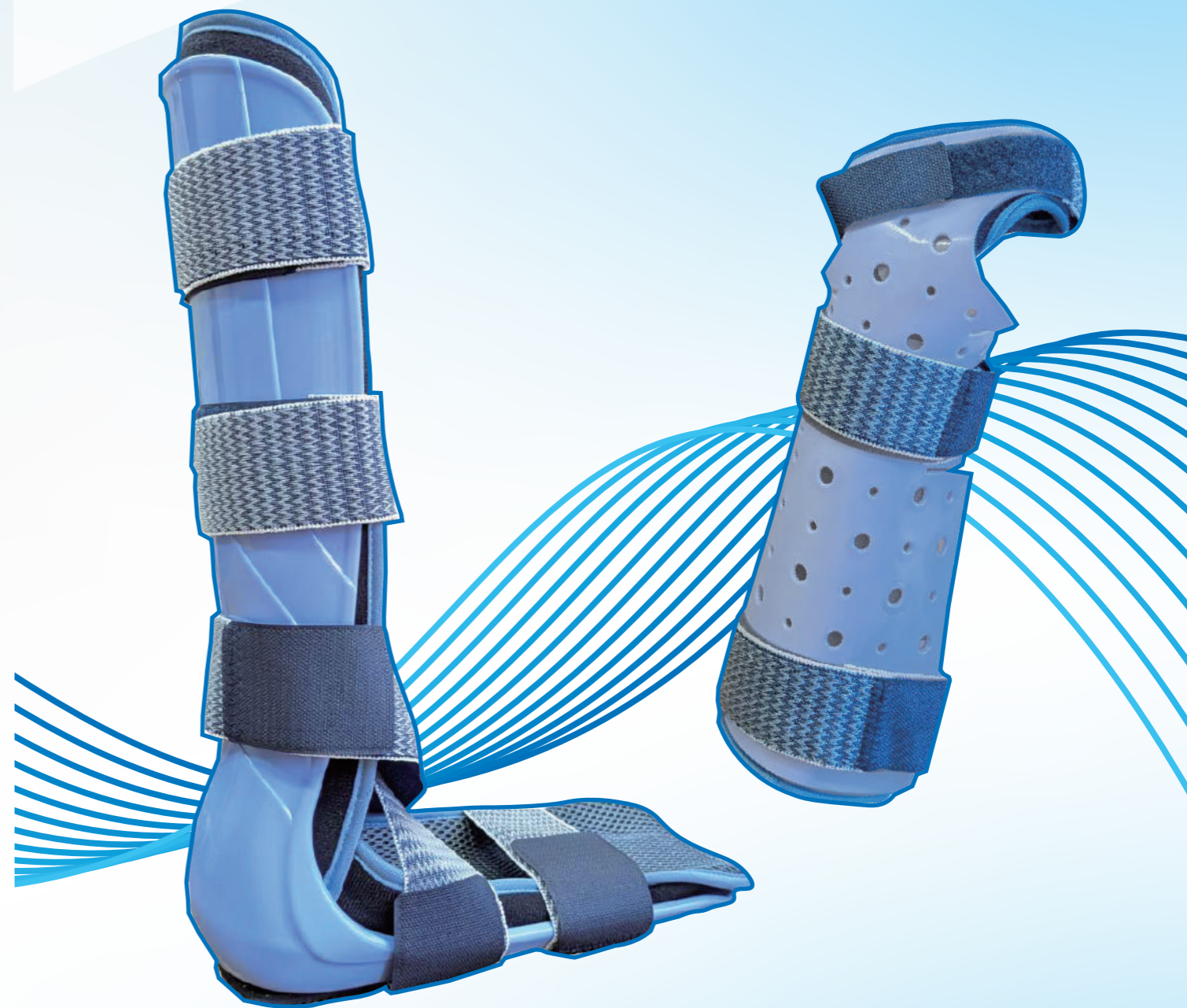

**JHM 日本ヒューマンメディック株式会社**  
JAPAN HUMAN MEDIC

# ALLONE QUICK SPLINT オールワン クイック スプリント


## 新世代スプリント

開封と同時に装着できる  
プレモールド熱可塑性ギプスシーネ

## 4 Special Points

### 1 アナトミカルデザインのプレモールドタイプスプリント

人体形状に基づいたアナトミカルデザインを採用したプレモールドスプリントのため、成形なしで即着脱が可能。処置の効率化と安定した固定を両立します。

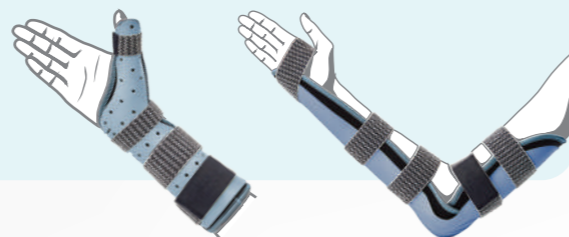

### 2 ギプス手技料の算定が可能

プレモールドスプリントでありながら、ギプス手技料の算定が可能。

半肢（片側）780点（リストスプリント、サムスパिकासプリント、ショートレッグスプリント）  
上肢・下肢（片側）1,200点（ロングアームスプリント、シリンダースプリント）



### 3 熱可塑性スプリント

熱可塑性樹脂を使用しているため、ドライヤーなどによって温めることで必要に応じて何度でも再成形できます。

そのため、装着後の違和感や腫脹の変化にも柔軟に対応できます。



### 4 ベルクロストラップとパッドが付属

ベルクロストラップとパッドを標準装備しており、簡単に固定できるうえ通気性も良好。緩衝材を別途用意する必要がありません。

処置のスピードと効率を高め、快適な装着感を実現します。

パッドは洗うことも可能です。



## 単回使用製品

## 使用方法

右のQRコードより、使用方法を動画で確認することができます。



### 加熱なし

（開封後、そのまま使用する）



① 適切なサイズを選び患部に沿わせて下さい。



② ベルクロストラップを使い本品で患部を固定して下さい。



③ 必要に応じて包帯固定も可能です。

### 加熱あり

（開封後、加熱してモールドイングする）




① 本品を袋から出してベルクロストラップを外し、箱や袋等に入れてドライヤー等で加熱します。十分に加熱すると成形や切断が可能になります。



② 加熱後は白色に変化しますが、冷却後は元の色に戻ります。やけどに十分注意して、装着して下さい。



③ 本品を患者に装着し、適切な形に成形して下さい。必要に応じてハサミで本品を切断することもできます。

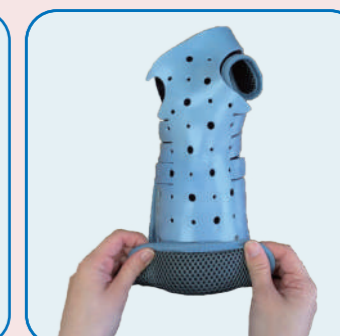

④ 切断した場合は切断面が鋭くなる可能性があるため余ったパッドを折り返して付属の両面テープで固定するなどして保護して下さい。



⑤ 成形したら包帯で固定し形状を保持します。2～3分後に硬化します。この時、冷風を当てるとより速く硬化します。



⑥ 硬化したら固定用の包帯を外しベルクロストラップで固定します。



⑦ 強い固定が必要な場合固定用の包帯を外さずそのまま固定しておくことも可能です。ベルクロストラップの上から包帯固定することもできます。

※加熱時に袋を使用する場合は布製の袋をご使用下さい。

ビニール製の袋では熱により袋が変形する可能性があります。